



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 6476 Elektronická osobní inSPORTline Dolsa



OBSAH

CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A FUNKCE	3
FUNKCE TLAČÍTEK	3
OVLÁDÁNÍ	3
ZPŮSOB MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ	4
Změření hmotnosti	4
Nastavení a uložení osobních údajů do paměti přístroje	4
BATERIE A JEJICH VÝMĚNA	7
DŮLEŽITÉ INFORMACE	7
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	8

Děkujeme Vám, že jste si z naší nabídky vybrali elektronickou osobní váhu pro měření podílu tělesného tuku a vody. Pro zajištění správného chodu, přesnosti měření a dlouhé životnosti doporučujeme, abyste si pečlivě přečetli tento uživatelský manuál.

CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE A FUNKCE

- Tento přístroj využívá pokročilou technologii BIA (bioelektrická impedanční analýza) pro měření podílu tělesného tuku, vody, svalové hmoty a kostí. Podíl tělesných složek se měří tak, že je do těla vyslán elektrický proud o velmi nízkém a bezpečném napětí a na základě elektrické vodivosti tělesného tuku a tkání počítač spočítá výsledek. Ten se následně zobrazí na displeji LCD.
- Kromě běžných údajů lze změřit také parametr BMI.
- Vysoce kvalitní senzor zajišťuje vysokou přesnost měření.
- Kvalitní tvrzené sklo a elegantní grafické zpracování dodává přístroji svěží a moderní design.
- Do paměti přístroje lze uložit osobní údaje až 10 různých uživatelů. Tato funkce umožňuje širší využití osobní váhy.
- Hmotnost lze měřit v rozmezí 2kg až 150kg.
- Přesnost měření: 0.1kg
- Automatické zapínání a vypínání
- Ukazatel slabé baterie a přílišného zatížení
- Lze přepínat mezi třemi různými jednotkami: kg/lb/st:lb
- Napájení prostřednictvím dvou lithiových baterií 3V typu CR2032. Baterie jsou součástí balení.

FUNKCE TLAČÍTEK



Tlačítko SET: Zapnutí, zobrazení nabídky a potvrzení nastavení

Tlačítko ▲: Nahoru

Tlačítko ▼: Dolů

OVLÁDÁNÍ

Oddělejte krytku baterií na spodní straně váhy a vložte baterie.



- Váhu umístěte na pevný a rovný povrch. Zkontrolujte, že je stabilní a nekýve se.

- Pro nastavení jednotky hmotnosti (kg, st, lb) váhu zapněte a počkejte, až se na displeji zobrazí „0.0“, poté vyberte jednotku pomocí tlačítek ▲ a ▼.

ZPŮSOB MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ

Změření hmotnosti

1. Chodidlem lehce sešlápněte nášlapnou desku. Na displeji se zobrazí „8888“ a poté se během pěti vteřin zobrazí „0.0“.
2. Postavte se vzpřímeně na váhu a udržujte rovnováhu. Na displeji se zobrazí Vaše hmotnost.
3. Po skončení vážení se váha automaticky vypne.

Nastavení a uložení osobních údajů do paměti přístroje

1. Nastavení osobních údajů

- 1.1. Stiskněte tlačítko SET. Pomocí šipek zvolte profil uživatele p0-p9, pod kterým uložíte své osobní údaje. Výběr uživatele potvrďte stisknutím tlačítka SET.



- 1.2. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte mužské (♂) nebo ženské (♀) pohlaví a pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET.



- 1.3. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte svůj věk (10-80 let). Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET.



- 1.4. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte svou výšku (100-225cm). Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko SET.



1.5. Po zadání osobních údajů stiskněte pro zahájení měření hmotnosti a podílu tělesného tuku a vody tlačítko SET.


2. Změření podílu tělesného tuku a vody

2.1. Pro změření podílu tělesného tuku a vody je třeba nejdříve vybrat uživatelský profil, ve kterém jsou uloženy Vaše osobní údaje. Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte svůj uživatelský profil a potvrďte výběr tlačítkem SET. Na displeji se zobrazí „0.0“.



2.2. Na váhu si stoupněte naboso, aby byl zajištěn dobrý kontakt s elektrodami.

2.3. Nejdříve se zobrazí Vaše hmotnost. Stůjte dále ve vzpřímené poloze, dokud se na displeji nezobrazí výsledek měření podílu tuku a vody v těle.

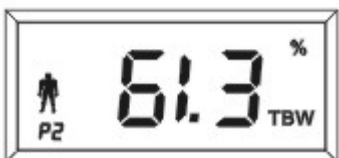

2.4. Vyhodnocení naměřené hodnoty tělesného tuku

TABULKA HODNOT TĚLESNÉHO TUKU PRO DĚTI OD DVANÁCTI LET A DOSPĚLÉ

VĚK	MUŽI			
	PODÍL TUKU V TĚLE			
	Podváha	Optimální hmotnost	Nadváha	Obezita
12-20	<18%	18-28%	28-33%	>33%
21-42	<20%	20-30%	30-35%	>35%
43-65	<21%	21-31%	31-36%	>36%
66-100	<22%	22-32%	32-37%	>37%

VĚK	ŽENY			
	PODÍL TUKU V TĚLE			
	Podváha	Optimální hmotnost	Nadváha	Obezita
12-20	<15%	15-21%	21-26%	>26%
21-42	<17%	17-23%	23-28%	>28%
43-65	<18%	18-24%	24-29%	>29%
66-100	<19%	19-25%	25-30%	>30%

2.5. Vyhodnocení stavu hydratace organismu

TABULKA VYJADŘUJÍCÍ POMĚR MEZI NAMĚŘENOU A OPTIMÁLNÍ HYDRATACÍ ORGANISMU

VĚK	MUŽI	ŽENY	Stav hydratace organismu	
<=30	60.0-60.5%	66.0-59.9%	Optimální stav	Rozsah: 37.8-66.0% Jednotka: 0.1%
	60.4-57.1%	59.8-56.4%	Velmi mírná dehydratace	
	57.0-53.6%	56.3-53.0%	Mírná dehydratace	
	53.5-50.2%	52.9-48.6%	Dehydratace	
	50.1-37.8%	48.5-37.8%	Silná dehydratace	
>30	66.0-59.1%	66.0-55.0%	Optimální stav	
	59.0-55.7%	54.9-51.6%	Velmi mírná dehydratace	
	55.6-52.3%	51.5-48.1%	Mírná dehydratace	
	52.2-48.8%	48.0-44.7%	Dehydratace	
	48.7-37.8%	44.6-37.8%	Silná dehydratace	

V různých zemích či oblastech se mohou lišit tabulkové hodnoty pro stanovení podílu tělesného tuku a vody. Proto by měly naměřené údaje sloužit pouze pro lepší orientaci.

Zapamatujte si svůj uživatelský profil. Při dalším měření už nebudete muset znova zadávat své osobní údaje.

POZOR

1. Váhu by neměly používat osoby s kardiostimulátorem.
2. U osob s ocelovými implantáty v těle bude měření nepřesné.
3. Pro větší přesnost měření doporučujeme vážit se každý večer ve stejný čas (19:00-21:00)
4. Hlášení „LO“ je ukazatelem vybitých baterií. V případě tohoto hlášení baterie vyměňte za nové.




5. Hlášení „EEEE“ je ukazatelem nadměrného zatížení, „Err2“ informuje o chybě v měření podílu tělesného tuku.
6. Jestliže je poměr tělesného tuku menší než 5% nebo větší než 50%, zobrazí se na displeji hlášení „Err2“. „Err2“ se zobrazí také v případě, že nastane nějaká chyba v průběhu měření impedance.



BATERIE A JEJICH VÝMĚNA

- K provozu tohoto přístroje jsou třeba 2 lithiové baterie typu CR2032.
- Při výměně baterií nejdříve sundejte krytku na zadní straně přístroje, vložte do přihrádky dvě nové lithiové baterie typu CR2032 (umístěte baterie kladnými póly směrem k sobě) a připevněte zpět krytku baterií.

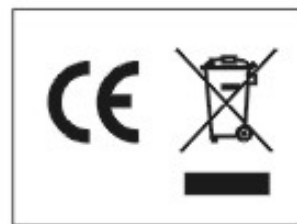

DŮLEŽITÉ INFORMACE

1. Osobní váhu umístěte na čistý a rovný povrch.
2. Přístroj nepokládejte na vlhký, horký či extrémně studený povrch.
3. Na váze neskákejte ani na ni neduňte. Nesnažte se přístroj rozmontovat.
4. Dbejte opatrnosti, abyste z váhy nespadli a nedošlo tak k poškození skla či elektrod.
5. Před stoupnutím na váhu si sundejte obuv, aby nedošlo k poškození skla nebo elektrod.
6. Přístroj nesmí být nikdy ponořen do vody. K čištění a leštění elektrod a skla používejte pouze speciální čisticí prostředky na bázi alkoholu. Nejdříve naneste čisticí prostředek na hadřík a setřete nečistoty. K čištění nepoužívejte mýdla.

7. Váha je určena pouze k domácímu použití. Nejedná se o profesionální lékařský přístroj. Výsledky měření podílu tělesného tuku a vody slouží pouze pro lepší orientaci. O vhodném cvičebním programu a dietě byste se vždy měli poradit s lékařem.
8. Pokud přístroj nefunguje správně, zkontrolujte stav baterií, případně je vyměňte. V případě dalších problémů požádejte o opravu prodejce nebo naši společnost.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamacie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamacie@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamacie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: