



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 7323 Masážní podložka inSPORTline SL-D24**



## **OBSAH**

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....	3
UMÍSTĚNÍ MASÁŽNÍHO PODLOŽKY .....	4
MASÁŽNÍ PODLOŽKU BY NEMĚLI POUŽÍVAT:.....	4
BEZPEČNOST .....	4
SOUČÁSTI MASÁŽNÍ PODLOŽKY.....	5
OVLÁDÁNÍ .....	5
SPECIFIKACE VÝROBKU .....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	6

Ultratenká masážní podložka má luxusní design a je vybavena funkcí pro dva typy masáže. Je určena pro stimulační masáž těla a jako prostředek podporující uvolnění svalstva. Podložka umožňuje nastavit 3 různé intenzity masáže (Silná, Středně silná a Mírná), díky nimž se budete cítit jako po profesionální masáži. Podložka je určena pro použití v autě nebo v pohodlí vašeho domova.

#### **Luxusní masážní podložka s funkcí pro dva typy masáže**

- Stimulační a vibrační masážní funkce
- Třífázová stimulační masáž pro vaše záda
- Terapeutická masáž pomocí paprsků Blue-ray a infračerveného záření
- Profesionální vibrační masáž pro stehenní svalstvo
- Ruční ovladač pro snadné a pohodlné ovládání
- Lze snadno připevnit na různé typy židlí a sedaček
- Pro použití v autě nebo v pohodlí vašeho domova



Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pozorně přečtete tento manuál, abyste se naučili podložku správně používat. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům a důležitým upozorněním. Manuál uschovejte pro případ další potřeby.

Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit vzhled a popis výrobku. Prosím, vezměte na vědomí, že barva jednotlivých výrobků se může lišit.

## **DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Při provozu nedávejte prsty do prostoru mezi potah a masážní hlavice.
- Dávejte pozor, abyste do podložky neupustili žádné nečistoty nebo drobky.
- Dbejte na to, aby se do podložky nedostala voda a předcházejte tak zranění elektrickým proudem nebo poškození výrobku.
- V případě poškození napájecího kabelu nebo zástrčky požádejte o opravu servisního technika.
- Používejte dobře uzemněnou elektrickou zásuvku, která vyhovuje technickým parametrům produktu.
- Předcházejte zraněním a poškození přístroje tím, že po použití a před čištěním vytáhnete zástrčku napájecího kabelu z elektrické sítě.
- Masážní podložku používejte pouze tak, jak je popsáno v manuálu.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem.
- Masážní podložka je určena pouze pro použití v interiéru – nepoužívejte ji venku.
- Podložku nepoužívejte, pokud je poškozen potah nebo kůže.
- Přístroj nepoužívejte v případě, že jste předtím požili alkohol nebo se necítíte dobře.
- Abyste předešli zraněním, nenastavujte příliš silnou intenzitu masáže.

## UMÍSTĚNÍ MASÁŽNÍHO PODLOŽKY

- Nepoužívejte masážní podložku při vysoké okolní teplotě a ve vlhkém prostředí, jako je např. koupelna.
- Nepoužívejte podložku bezprostředně po změně okolní teploty.
- Masážní podložku nepoužívejte v prašném či jakkoliv nepříznivém prostředí.

## MASÁŽNÍ PODLOŽKU BY NEMĚLI POUŽÍVAT:

- Lidé trpící infekčním kožním onemocněním.
- Lidé trpící osteoporózou.
- Lidé trpící srdečním onemocněním nebo lidé s elektronickými implantáty jako je např. kardiostimulátor.
- Lidé trpící zvýšenou tělesnou teplotou.
- Těhotné ženy.
- Zranění lidé a lidé s onemocněním kůže.
- Děti mladší 14 let nebo lidé s mentálním postižením, pokud nejsou pod odborným dohledem.
- Lidé, kteří mají od lékaře doporučený klidový režim a lidé, kteří se necítí dobře.
- Osoby, jejichž tělo není zcela suché (např. po plavání v bazénu apod.)
- Lidé citliví na teplo – povrch podložky je nahříván, proto by lidé citlivější na tepelné záření měli být při používání podložky opatrní.

## BEZPEČNOST

- Nezapojujte/nevypojujte zástrčku od napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Nesnažte se vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky taháním za napájecí kabel.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození kabelů a neupravujte elektrický obvod podložky.
- Vstaňte z podložky, dojde-li k dočasnému přerušení přísunu elektrické energie a předcházejte tak zraněním, která hrozí v případě, že se náhle přísun energie obnoví.
- Pokud masážní podložka nefunguje správně, kontaktujte servisní centrum.
- Pokud se necítíte dobře, přestaňte podložku používat a konzultujte váš zdravotní stav s lékařem.
- K čištění elektrických částí jako je vypínač a zástrčka nepoužívejte vlhký hadr.
- Pokud je napájecí adaptér poškozen, kontaktujte servisní centrum výrobce, servisního technika nebo jinou kvalifikovanou osobu, abyste předešli zraněním.
- Masážní podložku by neměli používat děti, lidé s tělesným a duševním postižením, lidé, kteří si nejsou zcela jisti ovládním – v těchto případech by měla být vždy přítomna zkušená osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Děti mohou podložku používat pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na jejich bezpečnost a správné použití podložky. Děti si nesmí s masážní podložkou hrát.

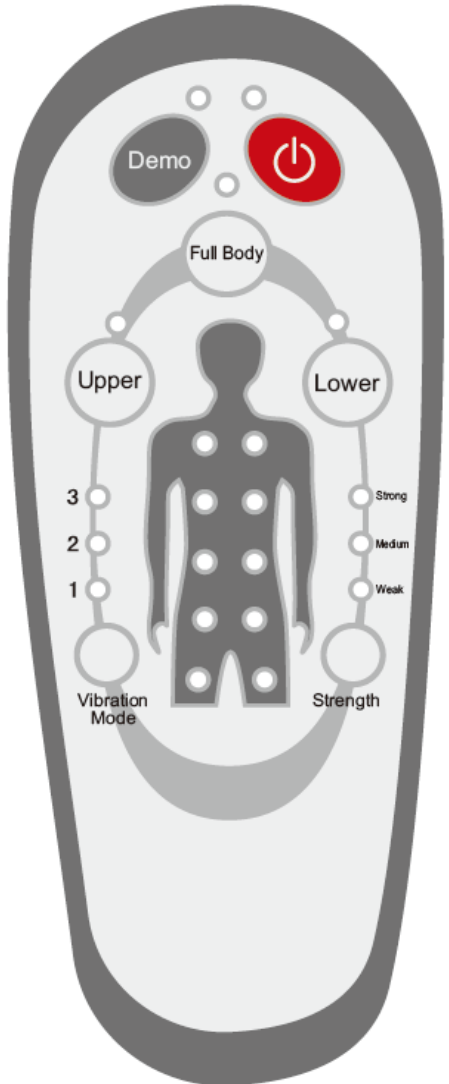
**Tato masážní podložka je výrobkem nové generace. Podložka má ergonomický design, který byl navržen v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti zdravotnictví. Masážní podložka účinně podporuje krevní oběh a metabolismus lidského těla. Podložka podporuje imunitu, pomáhá proti únavě a bolesti svalstva a pomocí stimulační bodové masáže uvolňuje napětí v břišním a bederním svalstvu.**

## SOUČÁSTI MASÁŽNÍ PODLOŽKY

Pohyblivý masážní mechanismus, 2 vibrační motory, ruční ovladač, řídicí jednotka DPS (DCP), napájecí adaptér, ochranu proti krádeži (pro použití v automobilu)

## OVLÁDÁNÍ

1. Po připojení do elektrické sítě stiskněte tlačítko POWER. Indikátor se rozsvítí (pokud červená kontrolka bliká – znamená to, že masážní hlavice není ve správné pozici. Upravte polohu masážní hlavice a červená kontrolka přestane blikat) a zapne se pohotovostní režim. Pokud zmáčknete tlačítko POWER znovu, podložka se vypne a vypne se i indikátor.
2. Pokud se podložka nachází v pohotovostním režimu – můžete si pomocí ovládacích tlačítek vybrat mezi jednotlivými masážními programy.
3. Pokud chcete masážní program ukončit, stiskněte tlačítko POWER. Indikátor se rozbliká a vibrační motor se vypne. Pohyblivý masážní mechanismus se spustí dolů a vypne se. Poté se vypne masážní program a indikátor zhasne.
4. Po 15 minutách nečinnosti se masážní program sám vypne.
5. Ovládací tlačítka jsou funkční pouze v pohotovostním režimu nebo v režimu masážního programu. Ovládací tlačítka nefungují během režimu DEMO.


	<p><b>OVLÁDACÍ TLAČÍTKA:</b></p> <p><b>VIBRACE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. V podložce se nachází 2 oblasti vybavené masážními kuličkami určenými pro masáž stehenního svalstva.</li><li>2. <b>VIBRAČNÍ REŽIM (VIBRATION MODE):</b> vibrační motor podložky umožňuje 4 druhy nastavení: režim 1 (mode 1), režim 2 (mode 2), režim 3 (mode 3) a zastavení (stop). Při každém stisknutí tlačítka se motor přepne na následující režim.</li><li>3. <b>INTENZITA (STRENGTH):</b> toto tlačítko je funkční, pouze pokud je vibrační motor zapnutý. Na masážní podložce lze zapnout 3 různé druhy intenzity masáže: Silná (Strong), Středně silná (Medium), Mírná (Weak).</li></ol> <p><b>POHYBLIVÁ MASÁŽ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>MASÁŽ CELÉHO TĚLA (FULL BODY):</b> po stisknutí tlačítka FULL BODY se indikátor nad tlačítkem rozsvítí. Mechanismus pro masáž zad se začne pohybovat nahoru a dolů.</li><li>2. <b>MASÁŽ HORNÍ POLOVINY ZAD (UPPER):</b> po stisknutí tlačítka UPPER se indikátor nad tlačítkem rozsvítí. Masážní mechanismus začne stimulovat svalstvo horní poloviny zad.</li><li>3. <b>MASÁŽ DOLNÍ POLOVINY ZAD (LOWER):</b> po stisknutí tlačítka LOWER se indikátor nad tlačítkem rozsvítí. Masážní mechanismus začne stimulovat svalstvo dolní poloviny zad.</li></ol> <p><b>DEMO</b></p> <p>Tlačítko je funkční pouze po připojení podložky k el. síti. Tlačítko DEMO slouží k předvedení všech funkcí masážní podložky. V režimu DEMO se předvede</p>
--	--

	celkem 9 masážních funkcí – 3 vibrační režimy a 3 různé stupně intenzity masáže. Po předvedení všech masážních funkcí se režim DEMO automaticky ukončí.
--	---

## SPECIFIKACE VÝROBKU

Model: SL-D24

Konfigurace: 01

Vstupní napětí: 12V 

Příkon: 25W

Doporučená maximální délka masáže: 15 minut



## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### Záruční podmínky

#### Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou reparací, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

## Reklamační řád

### Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



#### SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264  
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz  
Reklamacie: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz  
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz  
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)  
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



#### Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082  
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk  
Reklamacie: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk  
Fax: +421(0)326 526 705  
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: